

MLR Klimaprüfkammern




Mikroprozessorsteuerung

Eine mikroprozessorgesteuerte PID-Regelung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (0 °C bis +50 °C, 0 bis 20 000 Lux und 55 bis 90 % rel. Luftfeuchtigkeit) schafft die optimale Umgebung für verschiedene Anwendungen.

Programmierbare Einstellungen

Die Temperatur- und Lichteinstellungen sind programmierbar und bieten somit die perfekten Zyklen für die Vernalisation. Das Gerät gestattet die Programmierung von einem Anfangstag und einer Startzeit für den Betrieb sowie die Speicherung von 10 Programmen mit jeweils bis zu 12 Schritten. Außerdem ist es möglich, zwischen dem auswählbaren Uhr- oder Timer-Modus zu wechseln und den Verknüpfungsmodus zur Verknüpfung mehrerer Programme zu verwenden.

Einheit: mm (Zoll)

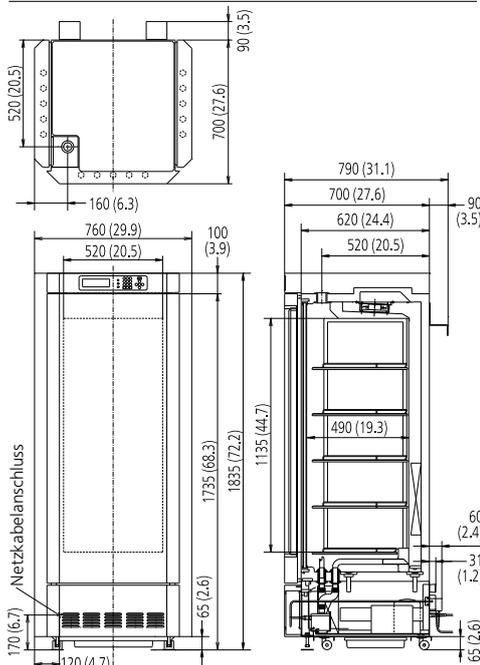

Modellnummer		MLR-352-PE	MLR-352H-PE
Außenabmessungen (B × T × H)	mm	760 × 700 × 1835	
Innenabmessungen (B × T × H)	mm	520 × 490 × 1135	
Volumen	Liter	294	
Nettogewicht	kg	226	235
Leistung			
Temperaturregelbereich und -schwankungen	°C	0 bis +50 (Lampe aus) ±0,3 +10 bis +50 (Lampe ein) ±0,3	
Temperaturkonstanz	°C	±1 (Lampe aus) ±2,5 (Lampe ein)	
Luftfeuchtigkeit und -schwankungen	% rel. Luftfeuchtigkeit	-	60 bis 90/LS:0 (15 bis 45 °C) 55 bis 85 / Lampe eingeschaltet (15 bis 45 °C)
Lichtregelbereich		Programmierbar von 0 bis 20 000	
Steuerung			
Temperatursensor		Thermistor	
Anzeige		LCD	
Kühlung			
Kühlmittel*		R-513A	
Kühlmittelgewicht	g	270	
Kühlmittel GWP		631	
Kühlmittelgesamtwicht (CO ₂ -Äquivalent)	t	0,170	
Bauform			
Außenverkleidung		Lackierter Stahl	
Innenverkleidung		Edelstahl SUS-304	
Isoliermaterial		PUF	
Außentür	Anz.	3	
Außentürverriegelung		N	
Tür mit wechselbarem Anschlag		-	
Innentür	Anz.	1	
Einlegeböden	Anz.	5	
Abmessungen des Einlegebodens (B × T × H)	mm		
Max. Traglast pro Einlegeboden	kg	25	
Zugangsanschluss	Anz.	1	
Position des Zugangsanschlusses		Decke	
Durchmesser des Zugangsanschlusses	Ø mm	40	
Alarmer (F = Fernalarm, O = optischer Alarm, A = akustischer Alarm)			
Stromausfall		F	
Temperatureinstellung außerhalb des zulässigen Bereichs		A-F	
Temperatur zu hoch		A-F	
Luftfeuchtigkeitseinstellung außerhalb des zulässigen Bereichs		-	O
Tür offen		O-A	
Signalpegel und Lautstärke			
Netzteil	O	230	
Frequenz	Hz	50	
Lautstärke ¹⁾	dB	47dB (Lampe EIN) / 45 dB (Lampe AUS)	

Änderungen des Erscheinungsbildes und der technischen Daten sind vorbehalten.

¹⁾ Nennwert
* Entspricht Artikel 11, Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Enthält fluorierte Treibhausgase.

PHC Europe

Ein Mitglied der PHC-Unternehmensgruppe

Eikdonk 1 | 4825 AZ Breda | Niederlande
T: +31 (0) 76 543 3833

www.phcd.com/eu/biomedical